



Sering alami tubuh suka kaku, kram, kesemutan, pegel , linu ?






Atau pernah mengalami cedera dan sedang masa rehabilitasi ?

DON'T WORRY
WE HAVE THE
BEST
SOLUTION




NANO EMS FOOT MASSAGER

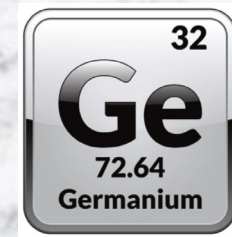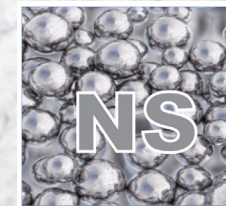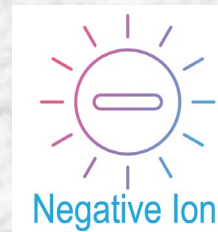

Apa itu teknologi NANO EMS FOOT MASSAGER?

Nano EMS Foot Massager dirancang dengan matras kaki berteknologi EMS sebagai elektroda untuk merangsang telapak kaki, tumit, *tendon achilles* serta otot betis untuk kontraksi otot dan relaksasi yang terutama membantu meningkatkan sirkulasi darah.

Dilengkapi dengan 4 kandungan (Ion Negatif, Infra Merah Jauh, Germanium & Nano Perak) untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda.

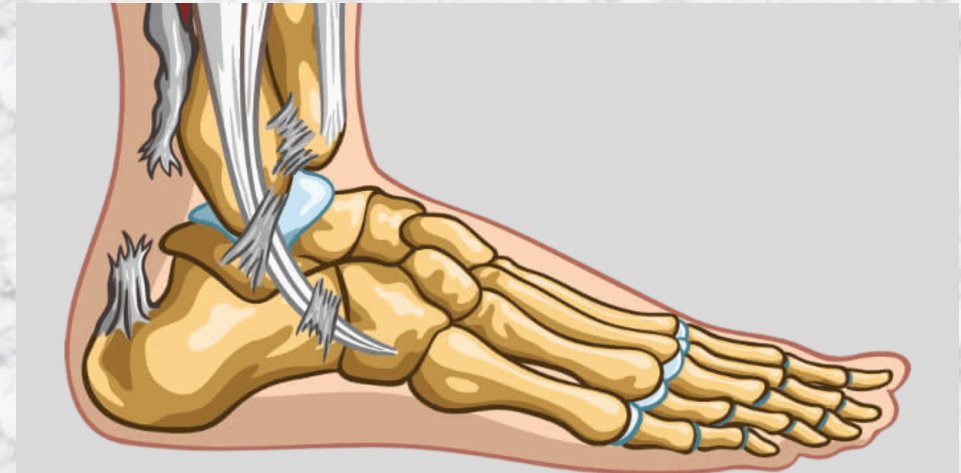

Apa itu teknologi EMS?

Electrical Muscle Stimulation (EMS), juga dikenal sebagai neuromuscular electrical stimulation (NMES) adalah pemicu kontraksi otot menggunakan impuls listrik.

Impuls tersebut meniru potensi reaksi yang berasal dari Sistem Pusat Saraf, menyebabkan otot-otot berkontraksi. EMS sangat terbukti efektif sebagai alat yang proaktif untuk memperkuat otot.

Manfaat EMS ?

- Membantu memperkuat otot
- Membantu proses rehabilitasi
- Membantu mencegah atrofi otot
- Membantu meningkatkan peredaran darah
- Membantu relaksasi otot Membantu mengencangkan otot

Fitur produk (1)

Terapi frekuensi rendah melalui irama dan tekanan lembut. Frekuensi rendah adalah aliran listrik khusus dengan irama teratur. Berdasarkan daya dan kecepatan yang sesuai pada tubuh dengan menggunakan frekuensi rendah, hal ini memberikan irama dan impuls lembut pada tubuh. Kelembutan dari frekuensi rendah sama seperti efek pijat seperti tekanan, cubitan dan ketukan dengan tangan.

Fitur produk (2)





6 pilihan mode dengan pengaturan sederhana. Alat ini akan berhenti otomatis setelah 15 menit, apabila TIDAK dimatikan.


- Mode 1
- Mode 2
- Gabungan Mode 1 + 2
- Mode 3
- Mode 4
- Gabungan Mode 3 + 4



Intensitas stimulasi dibagi menjadi 10 tingkatan (intensitas 1-10)..
Gunakan intensitas rendah saat penggunaan pertama kali. Silahkan disesuaikan setelah terbiasa dengan intensitas rendah.

Selain itu terdapat 4 kandungan yang dimasukkan dengan teknologi nano pada matras

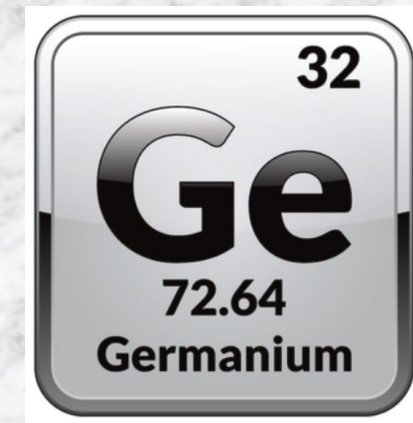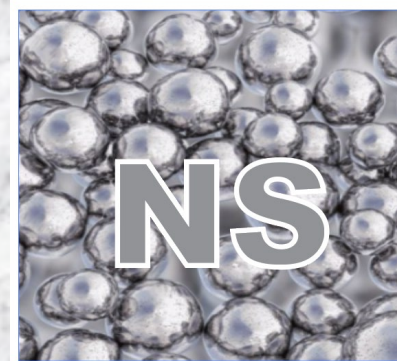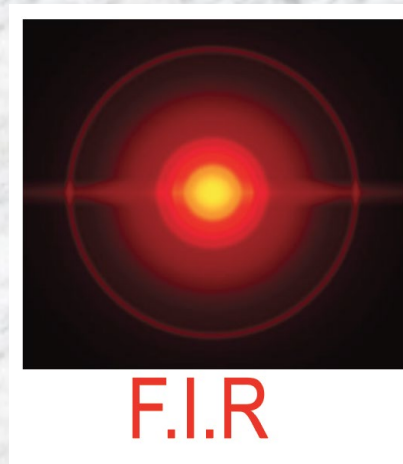
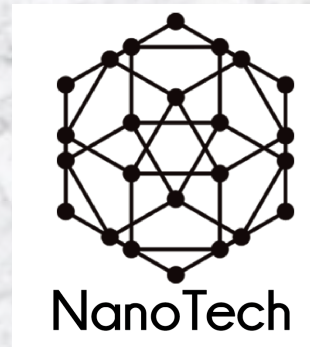


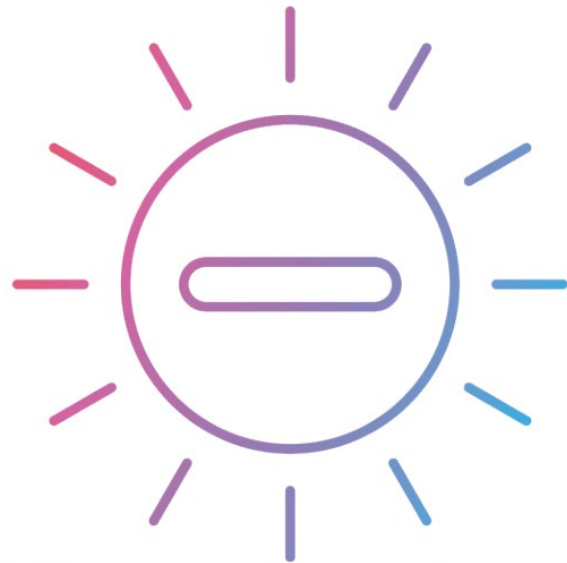


Negative Ion

Vitamin dalam udara, kandungan **Ion Negatif** dapat membantu memberi asupan oksigen pada seluruh kelenjar dan sel saraf di sepanjang jalur refleksologi pada telapak kaki. Membantu mengurangi rasa nyeri, pegal, kesemutan, dan ngilu serta membantu mengalirkan stimulasi impuls ke seluruh saraf telapak kaki untuk membantu menjaga kesehatan organ dan saraf tubuh di jalur refleksologi.


UJI TES ION NEGATIF ANTARA 3000 - 5000

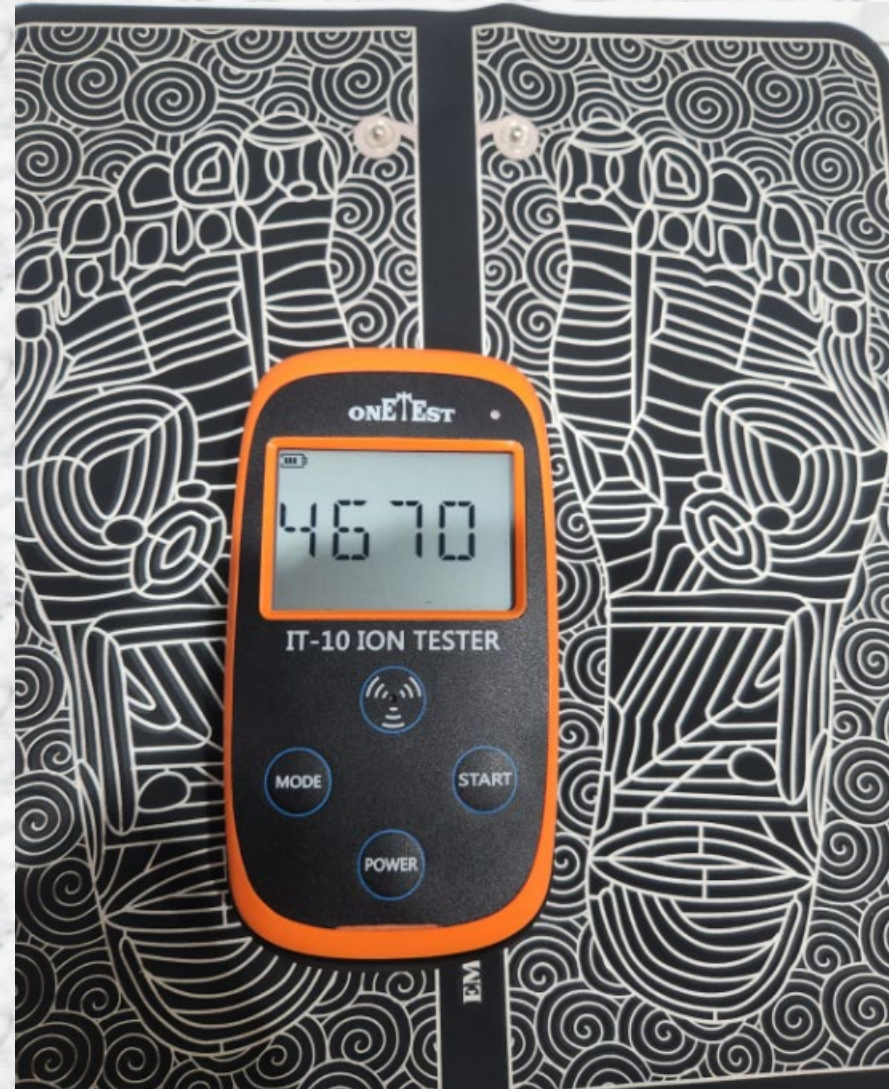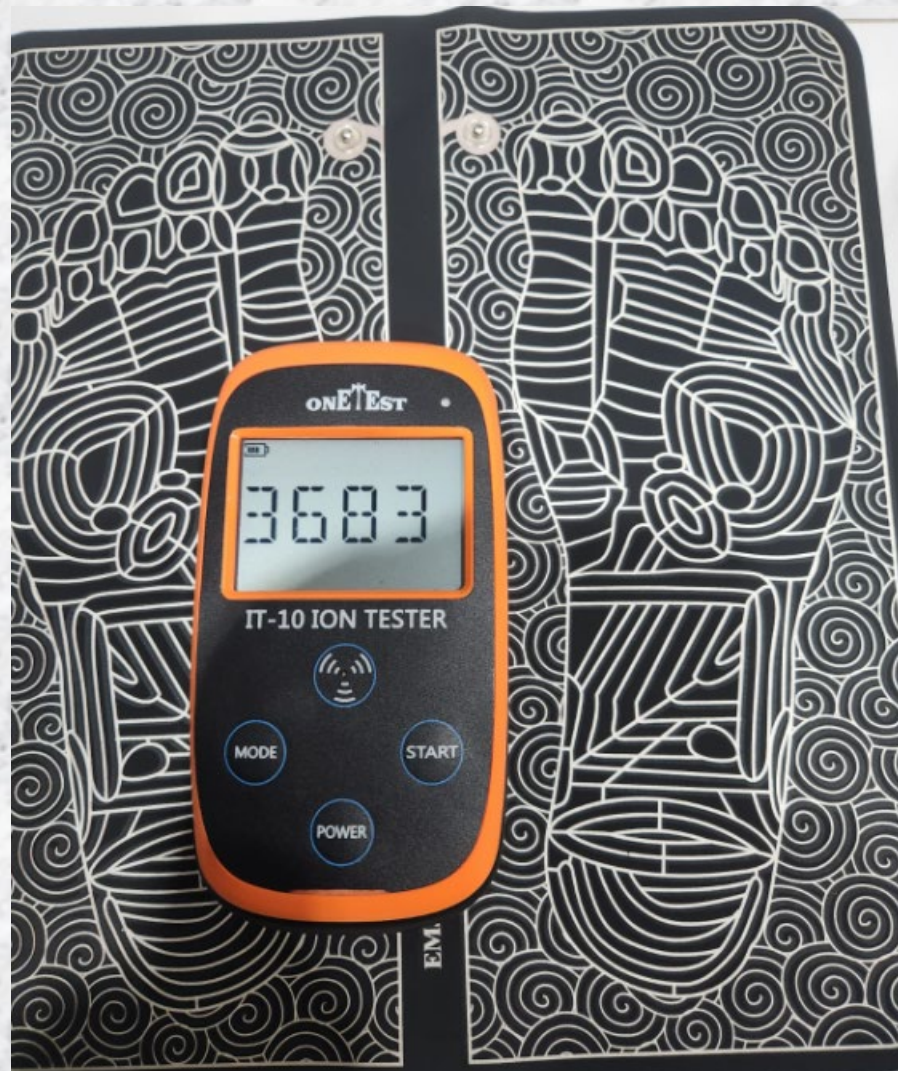

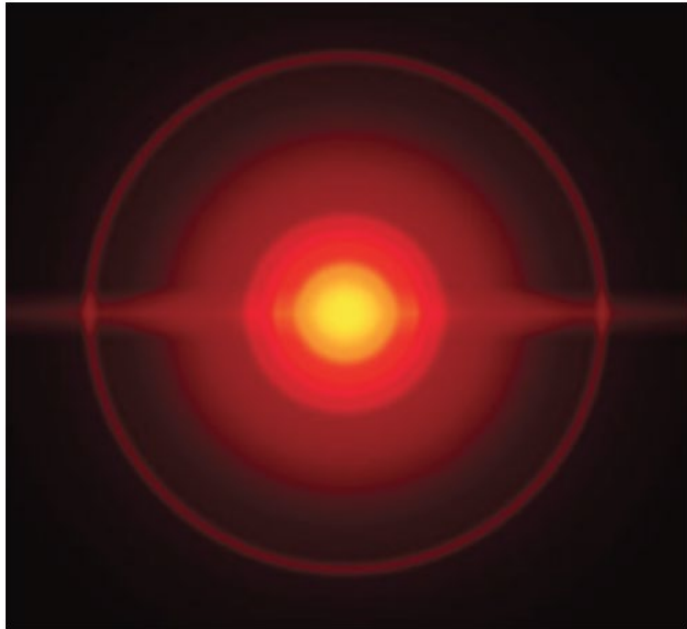

F.I.R

Gelombang **Infra Merah Jauh** seperti layaknya sinar matahari di pagi hari. Membantu melancarkan peredaran darah di sepanjang jalur refleksologi pada telapak kaki, sehingga membantu mempercepat proses pemulihan dan detoksifikasi.

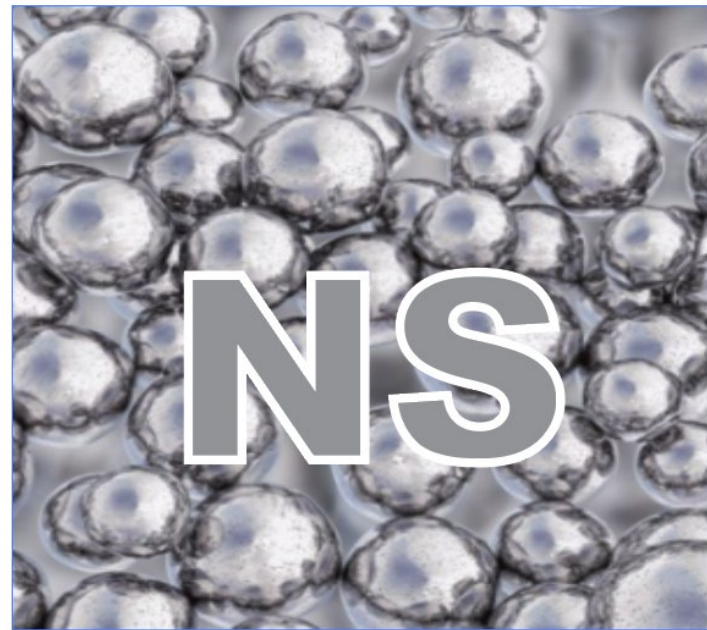

Nano Perak sangat efektif untuk membantu membunuh jamur, kuman, bakteri, virus hingga 99,9% (lebih dari 600 jenis), sehingga dapat berperan dalam penyembuhan sel lebih cepat, mencegah infeksi, dan membantu regenerasi sel.

Pori-pori nano perak dalam kain juga dapat membantu menghilangkan bau tidak sedap pada telapak kaki.



Germanium memiliki kapasitas dehidrogenasi oksidatif, mampu membantu menjaga sel memiliki cukup oksigen, membantu mengatur sistem kekebalan tubuh, membantu mencegah sel kanker, membantu meningkatkan ketahanan tubuh, membantu mencegah osteoporosis, membantu mencegah penuaan dini, membantu hipertensi, membantu mengembalikan keletihan, membantu mencegah anemia, dan membantu metabolisme.

MENGAPA PRODUK INI WAJIB DIMILIKI ???



Siapa saja boleh menggunakan ???

- Siapapun yang ingin menjaga Kesehatan saraf , otot dan organ
- Siapapun yang pernah cedera ataupun yang sedang dalam masa fisioterapi / rehabilitasi
- Siapapun yang sedang mengalami kelelahan hebat
- Siapapun yang merasa badan kaku, pegal, kesemutan

(Produk tidak bisa digunakan oleh anak-anak, minimal penggunaan USIA 15 tahun ke atas)



PERHATIAN !

Jangan gunakan produk ini untuk bagian-bagian berikut karena dapat menyebabkan efek samping dan masalah kulit dan tubuh

- Bagian sekitar dada dan bahu wajah, kepala, dll.
- Daerah yang luka, Mata, mulut, mukosa vagina, dll.
- Bagian yang menjalani operasi.
- Luka bekas operasi
- Lokasi implan logam dan plastik.
- Bagian tulang belakang.

Mohon jangan menggunakan pada bagian tubuh selain yang ditentukan dalam panduan

Informasi Keselamatan Umum

Produk ini tidak boleh digunakan dengan menutupi dengan bahan lain untuk meredakan rasa sakit yang tidak terdiagnosis. Sebelum mengobati gejala rasa sakit apa pun, Anda harus berkonsultasi dengan dokter Anda.

Untuk penggunaan perangkat dengan aman dan benar, disarankan agar Anda membaca panduan berikut sebelum menggunakannya

Pencegahan

- * **Gunakan intensitas rendah dan durasi singkat untuk permulaan awal dan menghindari stimulasi berlebihan.**
- * **Jauhi dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.**
- * **Produk ini tidak tahan air. Jangan memasukkan ke dalam air atau mencuci dengan air.**
- * **Jangan gunakan produk jika ada terkilir atau luka di kaki, telapak, pergelangan kaki, dan betis.**

Tindakan pencegahan keselamatan penting lainnya

1. Perangkat ini digunakan hanya untuk tujuan terapi fisik.
2. Hanya gunakan aksesoris yang disediakan dengan matras kaki.
3. Jangan gunakan perangkat ini di tempat dengan kelembaban tinggi seperti kamar mandi.
4. Jangan mencoba untuk memperbaiki perangkat sendiri karena hal tersebut akan membatalkan garansi.
5. Jangan biarkan perangkat bersentuhan dengan benda logam apa pun, seperti ikat pinggang atau perhiasan.



PERHATIAN !

ORANG-ORANG BERIKUT TIDAK DISARANKAN UNTUK MENGGUNAKAN PRODUK INI

- Siapa pun yang telah dipasang dengan pacemaker atau defibrilator jantung terpasang otomatis (AICD).
- Wanita hamil.
- Orang-orang dengan trombosis vena dalam (DVT) untuk menghindari pergerakan gumpalan darah.
- Orang-orang dengan tekanan darah tinggi.
- Orang-orang dengan penyakit jantung.



DEMO CARA PAKAI



DISCLAIMER

produk mgiclub bukan obat dan lebih untuk membantu bukan menyembuhkan. Hasil tiap-tiap orang bisa berbeda, dan kami tidak claim bahwa akan mendapatkan hasil yang sama dengan testimoni orang lain. Semua testimonial kami berasal dari orang yang nyata, dan mungkin tidak mencerminkan pengalaman pembeli pada umumnya, dan tidak dimaksudkan untuk mewakili atau menjamin bahwa siapa pun akan mendapatkan hasil yang sama atau serupa.

Untuk hasil maksimal bagi yang sedang mengalami sakit berat atau dalam masa rehabilitasi Tetap disarankan untuk berkonsultasi kepada ahli medis seperti dokter / Rumah sakit

*Untuk kalangan sendiri



Nano EMS Foot Massager

Stimulasi Pijat Elektrik



Dapatkan segera produk yang luar biasa ini sekarang juga-

SELAMAT MENCOBA DAN BANTU SESAMA !

NANO EMS FOOT MASSAGER

Harga Mitra = 50 PV

Harga Konsumen = Rp 1,200,000

Bisa didapat melalui fitur Registrasi / Upgrade / Repeat Order / Redemption atau bisa hubungi Master Stockist Terdekat Untuk rolling !





Terima Kasih Atas Perhatian dan Atensinya

Untuk Informasi dan pengumuman lebih lanjut tentang MGICLUB
dapat langsung menghubungi orang yang mengundang Anda

www.mgiclub.com



<https://www.facebook.com/mgiclubinternational>